

i-TFC fiber

光ファイバーポストに 1.5mmφが登場!

i-TFCファイバー 光ファイバーポスト 0.9mmφ、1.1mmφ、1.3mmφに
新サイズの1.5mmφを追加しました。

太い根管への適用はもちろん、アクセサリーファイバーと併用することで
扁平根管などへの適用範囲がさらに広がりました。

より様々な根管に適用可能!

光ファイバーポスト1.5mmφは必要に応じてアクセサリーファイバー
と組み合わせることで、ファイバーアレンジメントができます。

※光ファイバーポスト1.5mmφはスリーブと併用できません。



テーパーが小さく太い根管
【光ファイバーポスト 1.5mmφ】
断面図



テーパーが小さく太い根管
【光ファイバーポスト 1.5mmφ】



太い扁平根管
【光ファイバーポスト 1.5mmφ
+ アクセサリーファイバー】


光ファイバーが入った光透過性の高いファイバーポスト

光ファイバーポスト

特許取得済


特許第4505526号 歯科用支台築造光ファイバー入りファイバーポスト、およびそれを含む歯科治療用キット

ポストの中心に光ファイバーが入っており深い根管の奥まで光を通すことができます。
そのため根管深部のレジンまでしっかりと重合硬化できます。

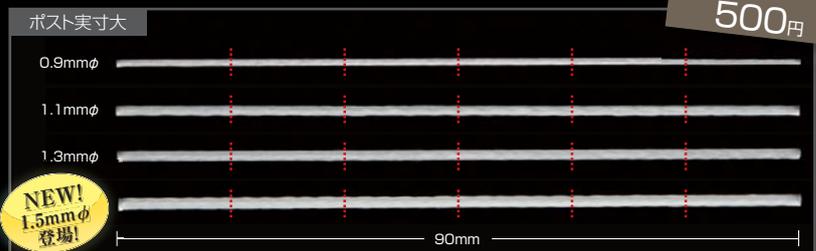

光ファイバーポスト1.5mmφ使用例

光ファイバーポスト1.5mmφのみ使用

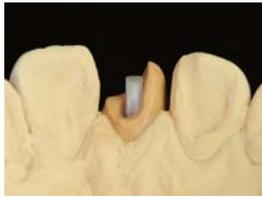

光ファイバーポスト試適、切断



ポストレジン填入後、光ファイバーポスト挿入、光照射



コアレジンフロー築盛後、光照射



形態修正

光ファイバーポスト1.5mmφとアクセサリーファイバー使用



光ファイバーポスト、アクセサリーファイバー試適、切断



ポストレジン填入後、光ファイバーポストおよびアクセサリーファイバー挿入、光照射



コアレジン築盛後、光照射



形態修正

包装・価格



歯科用支台築造材料

i-TFCシステム セット 標準価格 ¥16,800

光ファイバーポスト(0.9mmφ×90mm)	1本
光ファイバーポスト(1.1mmφ×90mm)	1本
光ファイバーポスト(1.3mmφ×90mm)	1本
アクセサリーファイバー(0.5mmφ×90mm)	1本
スリーブ(2.0mmφ×50mm)	1本
コアレジンフロー(A2)	1本(3.0g)
19Gニードル	5本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)
ポストレジン	1本(2.6g)
20Gニードルスーパーロング	5本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)
収納ケース	1ケース



関連単品

グラスファイバーポスト



歯科根管用ポスト成形品

i-TFCファイバー 光ファイバーポスト

0.9mmφ×90mm	3本入り	¥9,000
1.1mmφ×90mm	3本入り	¥9,000
1.3mmφ×90mm	3本入り	¥9,000
1.5mmφ×90mm	3本入り	¥9,000



歯科根管用ポスト成形品

i-TFCファイバー ポスト(ワイヤー入り)

1.1mmφ×90mm	3本入り	¥9,000
1.3mmφ×90mm	3本入り	¥9,000

補強用グラスファイバー



歯科根管用ポスト成形品

i-TFCファイバー アクセサリーファイバー

0.5mmφ×90mm	3本入り	¥4,500
-------------	------	--------



歯科根管用ポスト成形品

i-TFCファイバー スリーブ

2.0mmφ×50mm	3本入り	¥9,000
-------------	------	--------

グラスファイバー用プライマー



歯科用支台築造材料

i-TFCシステム ファイバーポストプライマー

10mL	¥3,800
------	--------

ポスト用レジン



歯科用支台築造材料

i-TFCシステム ポストレジン

2.6g	¥3,500
------	--------



20Gニードルスーパーロング

20本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)	¥800
------------------------	------



歯科用支台築造材料

i-TFCシステム コアレジンフロー

3.0g	¥3,980
------	--------



19Gニードル

20本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)	¥800
------------------------	------



歯科用支台築造材料

i-TFCシステム コアレジン

3.5g 各色(A2/CLEAR)	¥3,980
-------------------	--------

歯科用支台築造材料 i-TFCシステム(管理医療機器) 医療機器認証番号 21800BZZ10135000 歯科根管用ポスト成形品 i-TFCファイバー(管理医療機器) 医療機器認証番号 220AFBZX00225000

■ご使用に際しては、必ず製品添付の「添付文書」をお読みの上、正しくお使いください。 ■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。

■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。 ■標準価格・表示記載は2017年2月21日現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

■資料請求 お問い合わせ先

サンメディカル株式会社

本社/〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 ☎077(582)9980

フリーダイヤル 0120-418-303 (FAX共通) 電話受付時間 月～金(祝日を除く) 午前9:00～午後5:30
ホームページ <http://www.sunmedical.co.jp>